


オーダーメイド用成形部品CM関節用装具

Smart Fab シリーズ


CM-rest

シー・エム・レスト

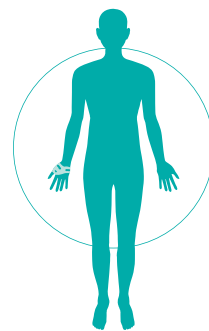

CM-rest

シー・エム・レスト

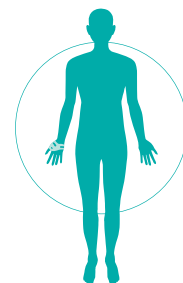

優れた母指CM関節制御手法

装具手掌部は母指IP～第5中手骨まであり、母指対立位や内転位を制御します。また、装具背側部は母指CM関節部まで覆うことで背側脱臼位を制御します。

優れたフィッティング手法

関節運動を制御する要素は硬く、トリミングライン周りは柔らかい仕様となっているため、硬性でありながら優れた装着感を実現します。

効率的で環境にやさしい製造手法

本製品をオープンで加熱し、採型した陽性モデルへ成形することで、いつでも均質的な製造が可能です。また、トリミングも必要に応じて最小限行うだけであり、効率的で環境にもやさしい製造手法です。

製造イメージ



〈ベルト装着時イメージ〉



製作工程の
動画はこちら



MP部周径	サイズ
16.5～17.5	XS
18.0～19.0	S
19.5～21.0	M
21.5～23.5	L

《サイズ目安》

- ※1) 手のMP部周径よりサイズ選定してください。
- ※2) メジャー計測時は少しテンションをかけた状態で計測してください。
- ※3) 計測値が2サイズの間の場合は、大きい方のサイズを選定し、トリミングすることをお勧めします。

※本製品はオーダーメイド製品のため、ベルト／パッドは付属していません。

●掲載の写真は実際とは多少異なる場合がございます

取扱店

製造

 株式会社
徳田義肢製作所

販売元



株式会社 トクダ オルソ テック

〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6-27-20
TEL.096-373-7558 FAX.096-364-0865

<https://www.tokuda-orthotech.co.jp>

